

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Báscula de Baño Electrónica ENFA
Modelo B15



FINALIDAD

Medición del peso corporal, en ambiente de uso doméstico

ESPECIFICACIONES


- Dimensiones: 30x30x1,75 cm
- Peso: 1500 g
- Tamaño pantalla LCD: 73x34mm
- Vidrio de seguridad templado de 6mm
- Capacidad máxima: 180 kg/396lb/28,8st
- Escala: 100g/0,2lb
- Restablecimiento automático del 0
- Apagado automático
- Indicador de sobrecarga
- Indicador de batería baja
- Pila CR2032
- Equipado con sensores de alta precisión

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Antes de usar, inserte la pila en el compartimento situado en la parte posterior de la báscula o retire la tira aislante que la protege. Cambie la pila cuando se muestre el "Indicador de batería baja"

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Coloque la báscula sobre una superficie sólida, estable y horizontal para realizar la pesada, esto asegurará una mayor precisión y repetibilidad de la medida.
2. Suba a la báscula, ésta mostrará su peso en la pantalla LCD tras parpadear 3 veces.

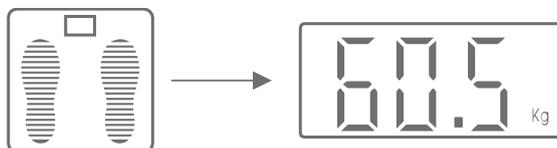

APAGADO AUTOMÁTICO

Si no se realiza ninguna pesada mientras la báscula marca 0, ésta se apagará automáticamente después de aproximadamente 10 segundos.

INDICADOR DE SOBREPESO

Cuando el peso supera la capacidad de la báscula (180kg/396lb/28,8st), aparecerá lo siguiente en la pantalla:



BATERÍA BAJA

Cuando es necesario cambiar las pilas, aparecerá lo siguiente en la pantalla:



Abra el compartimento de las pilas, situado en la parte posterior de la báscula, y sustituya la pila.

LIMPIEZA

Limpie la báscula con un paño húmedo y detergente o limpiador neutro, si es necesario. Nunca sumerja la balanza en agua ni la enjuague con agua corriente.

ADVERTENCIAS

- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico. En caso de uso profesional, uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones, el fabricante no acepta ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de validez.
- Coloque la báscula en una superficie estable, esto garantizará una mayor precisión y repetibilidad. Los pisos irregulares pueden afectar a las medidas.
- Pésese siempre con la báscula colocada en la misma superficie.
- Proteja la báscula contra golpes, humedad, polvo, productos químicos, cambios drásticos de temperatura, campos electromagnéticos y fuentes de calor que estén demasiado cerca.
- Nunca pise el borde exterior de la báscula con el pie, esto podría provocar que la báscula se incline.
- Para reducir el riesgo de accidentes (resbalamiento o posibles caídas), NO utilice la báscula con los pies mojados o si hay presencia de agua sobre la base de cristal.
- No mezcle pilas ya usadas con pilas nuevas. No mezcle pilas alcalinas, pilas estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio)
- Los materiales de embalaje como bolsas de plástico, cartón, etc. no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una potencial fuente de peligro.
- Si la báscula no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado, quítele la pila.

GESTIÓN COMO RESIDUO

- Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica. Extraiga la pila y deposite el producto en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado como Residuo de Aparato Eléctrico y Electrónico (RAEE). Haga lo mismo con la pila extraída.
- No arroje las pilas gastadas al fuego, pueden explotar o tener fugas.

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de dos años desde la fecha de su adquisición. Durante este periodo subsanaremos cualquier defecto de material o fabricación de la siguiente manera:

1. Mediante la sustitución de las piezas defectuosas, reparación o reemplazo por un producto nuevo, según nuestro criterio. En el caso que dicho producto ya se encuentre descatalogado o no se disponga en stock, será reemplazado por uno con prestaciones equivalentes.
2. Queda excluida de la presente garantía cualquier defecto producido por las siguientes causas:
 - Que el producto haya sido modificado.
 - Que el producto no haya sido utilizado o mantenido de acuerdo con las instrucciones de uso.
 - Que el defecto se haya producido debido a un uso o manejo inadecuado, negligencia, o manipulación por personal no autorizado.
3. En caso de que la reclamación fuese injustificada o no procediese, nos reservamos el derecho de exigir la compensación adecuada en concepto de inspección y envío del equipo.
4. Esta garantía se rige por lo marcado en Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Esta garantía sólo será válida cuando esté sellada y fechada por el establecimiento vendedor, así como acompañada del justificante de compra.

Importado por: ENVASES FARMACÉUTICOS, S.A. C/Paralela, 15 C.P.28860 Paracuellos de Jarama (Madrid)

Fabricado en P.R.C.



RoHS
Compliant



GARANTIA:

ENFA S.A.
Paralela, 15 – 28860
Paracuellos de Jarama
Tel.: +34 91 658 09 36

Fecha: / /

Sello del vendedor:

B15 TEC 29-2/00