

Strapin

Vendaje de tobillo
Ankle bandage



EMO
especialista
en ortopedia

Strapin

Vendaje de tobillo

Ankle bandage
Bandage à la cheville
Bandagem de tornozelo
Knöchelbandage
Bendaggio alla caviglia



EMO
especialista
en ortopedia

INDICACIONES Sujeción de tobillo. Vendaje en ocho. Fascitis plantar. Pie abierto. Sujeción en laxitudes crónicas. Sujeción de bolsas de gel o electrodos.

INDICATIONS Ankle support. Figure-eight bandage. Plantar fasciitis. Open foot. Support for chronic laxities. Support for gel packs or electrodes.



0051

EMO ESPECIALIDADES
MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.
Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) Spain
www.emo.es +34 963 132 051

ELÁSTICO
ELASTIC

TRANSPIRABLE
BREATHABLE

CIERRE MICRO-VELCRO
MICRO-VELCRO CLOSURE

ONE
SIZE

RECOMENDADO PARA
SUJECIÓN DE BOLSAS
DE GEL O ELECTRODOS

RECOMMENDED FOR
HOLDING GEL BAGS
OR ELECTRODES

STP080
Strapin de Tobillo

Longitud 80 cm.



EMO
especialistas
en ortopedia

Strapin Vendaje de tobillo Ankle bandage

NORMATIVA: Este producto sanitario cumple el Reglamento (EU) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre productos sanitarios y las respectivas regulaciones nacionales. Se ha realizado un Análisis de Riesgos (UNE EN ISO14971) minimizando todos los riesgos existentes. Producto sanitario Clase I, no estéril, sin función de medición.

COLOCACIÓN: Rodear el tobillo con la cinta elástica. Finalmente: ajustar la tensión y fijar el extremo con velcro sobre la superficie de la cinta.

PRECAUCIONES: Si se produjese alguna reacción alérgica, irritación o hinchazón o si existe dolor de manera continuada, retirar el producto y consultar con el médico prescriptor o profesional sanitario. No exponer a una llama o fuente de calor a temperaturas muy elevadas.

ADVERTENCIAS: La ortesis debe utilizarse siguiendo las indicaciones o recomendaciones del prescriptor o del profesional sanitario. Siga las indicaciones del fabricante para una correcta colocación de la ortesis. Para una adaptación personalizada, consulte a un especialista. No utilizar directamente sobre cicatrices abiertas o enrojecidas sin estar debidamente protegidas.

Para la eliminación del producto utilizar el contenedor de residuos sólidos. Para la eliminación del envase, dependiendo del material del este, utilizar el contenedor del papel/cartón o el contenedor del plástico. En todo caso se debe cumplir estrictamente con la normativa del país.

Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

LAVADO Y MANTENIMIENTO: Lavar con agua fría, jabón neutro y dejar secar al aire. Guardar la temperatura ambiente, preferentemente en el envase de origen.

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y GARANTÍAS: Todos los materiales utilizados han sido testados, cumplen con la normativa europea aplicable y ofrecen la máxima seguridad y comodidad durante su utilización. Certificado Deko-Text Standard 100: etiqueta ecológica textil que garantiza la ausencia de sustancias perjudiciales para la salud y certifica la ausencia de sustancias nocivas en todos los materiales con los que está confeccionada la ortesis. Garantía dentro del marco de las disposiciones legales.

Fecha de publicación de la última revisión V1 11/2021

REGULATIONS: This medical device complies with Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council on medical devices and the respective national regulations. A Risk Analysis (UNE EN ISO14971) has been carried out, minimizing all existing risks. Class I medical device, non-sterile, without measurement function.

POSITIONING: Surround the ankle with the elastic band. Finally: adjust the tension and fix the end with velcro on the surface of the tape.

PRECAUTIONS: If an allergic reaction, irritation or swelling occurs or if there is continuous pain, remove the product and consult with the prescribing doctor or health professional. Do not expose to a flame or heat source at very high temperatures.

WARNINGS: The orthosis must be used following the indications or recommendations of the prescriber or health professional. Follow the manufacturer's directions for proper orthosis placement. For a personalized adaptation, consult a specialist. Do not use directly on open or red scars without being properly protected.


To dispose of the product, use the solid waste container. For the disposal of the container, depending on the material of the container, use the paper / cardboard container or the plastic container. In any case, you must strictly comply with the regulations of the country.

Any serious incident related to the product must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and / or the patient are established.

WASHING AND MAINTENANCE: Wash with cold water, neutral soap and allow to air dry. Store at room temperature, preferably in the original container.

QUALITY AND GUARANTEE CERTIFICATES: All the materials used have been tested, comply with the applicable European regulations and offer maximum safety and comfort during use. Deko-Text Standard 100 Certificate: ecological textile label that guarantees the absence of substances harmful to health and certifies the absence of harmful substances in all the materials with which the orthosis is made. Guarantee within the framework of legal provisions.

Date of publication of the last revision V1 11/2021

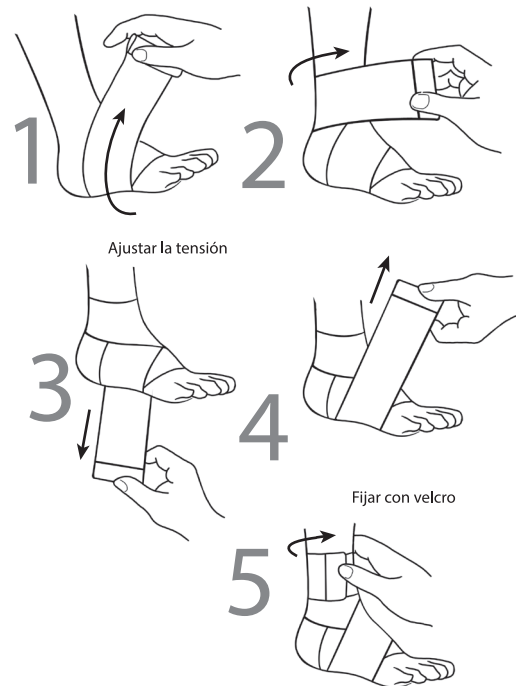

CARACTERÍSTICAS

Vendaje elástico transpirable
Cierre micro-velcro
Longitud 80 cm.
No contiene látex

EFFECTOS

Vendaje de sujeción y compresión

INDICACIONES

Sujeción de tobillo
Vendaje en ocho
Fascitis plantar
Pie abierto
Sujeción en laxitudes crónicas

TALLAS

Única
Largo / Ancho
80 / 7,5

FEATURES

Breathable elastic bandage
Micro-velcro closure
Length 110 cm.
Latex free

EFFECTS

Support and compression bandage

INDICATIONS

Ankle support
Bandage in eight
Plantar fasciitis
Open foot
Support in chronic laxity

SIZES

One Size
Length / Width
80 / 7.5



Fabricante
Manufacturer



Fecha de fabricación
Date of manufacture



LOT Número de lote
Lot number



REF Referencia
Reference



CE Conformidad CE
CE conformity



Mantener seco
Keep dry



Caducidad
Expiration



Consultar instrucciones
Consult instructions



No contiene Látex
Does not contain Latex



MD Producto sanitario
Medical device



Reciclable
Recyclable



Mantener alejado de la luz
Keep away from light



Punto verde
Green point