

Other languages



  
MOBICLINIC

## AMPLIFICADOR DE SONIDO EARPLUS2



ES- Lea las instrucciones antes de usar el producto.

EN - Please read instructions before use.

Manual de instrucciones

ES

Instruction manual

EN

Manuel D'Utilisation

FR

Manuale D'Istruzioni

IT

Anweisungen

DE

Instruções

PT

Gebruiksaanwijzing

NL

Bruksanvisning

SWE

Instrukcja obsługi

PL

Brugsanvisning

DK

Última revisión: 2 de mayo de 2024

Last revision: May 2nd, 2024


## 1. ADVERTENCIAS

1. **¡ADVERTENCIA!** Este amplificador de sonido está recomendado para personas de 18 años o más.
2. **¡ADVERTENCIA!** El amplificador de sonido no debería de causar dolor en el momento de insertarlo.
3. **¡ADVERTENCIA!** Si experimenta picor, enrojecimiento, dolor, inflamación o sensación de quemazón en o alrededor de los oídos, deje de utilizar el producto.
4. **¡ADVERTENCIA!** El tapón del amplificador de oído no debe ser incómodo ni doloroso.
5. **¡ADVERTENCIA!** Quítese el amplificador de sonido para las resonancias magnéticas u otros procedimientos electromagnéticos.
6. **¡ADVERTENCIA!** Si alguna parte del amplificador de sonido, como el tapón, se te queda atascada en el oído y no puedes extraerla fácilmente con los dedos, busca ayuda médica lo antes posible. No intentes utilizar pinzas ni bastoncillos de algodón, ya que podrían empujar la pieza hacia el interior del oído.
7. **¡ADVERTENCIA!** No comparta su amplificador de sonido con otras personas.
8. **¡ADVERTENCIA!** Las personas que empiezan a utilizar amplificador de sonido a veces necesitan unas semanas para acostumbrarse a ellos.
9. **¡ADVERTENCIA!** El amplificador de sonido, sus piezas y las pilas no son un juguete. Manténgalos fuera del alcance de los niños.
10. **¡ADVERTENCIA!** Es posible que note una acumulación acelerada de cerumen al utilizar el amplificador de sonido. Esto es normal.

**11. ¡ADVERTENCIA!** Precaución con el volúmen alto por su impacto auditivo como pérdida auditiva con exposiciones prolongadas.

## 2. ENCENDER / APAGAR

Para encender el amplificador de sonido, el interruptor debe estar situado donde se indica "ON". El interruptor debe colocarse en la posición "OFF" cuando el aparato no esté en uso. Esto asegurará una mayor duración de la batería.

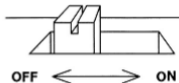

## 3. VOLUMEN

El amplificador de sonido tiene 6 niveles de control de volumen. Se recomienda encender el aparato en el nivel 1 y a partir de ahí, ajustar el volumen según las necesidades del usuario.

- Nivel 1 no tiene sonido.
- Nivel 2 ganancia máxima  $30 \pm 5$
- Nivel 3 ganancia máxima  $33 \pm 5$
- Nivel 4 ganancia máxima  $36 \pm 5$
- Nivel 5 ganancia máxima  $38 \pm 5$
- Nivel 6 ganancia máxima  $40 \pm 5$

#### 4. BATERÍA

Abra la tapa de la pila e introduzca la pila. Utilice una pila de botón de 1,5 V.


#### 5. PRECAUCIÓN

Este producto no es impermeable, por lo que el usuario debe tener cuidado para evitar que entre agua en el amplificador de sonido.

Es importante aumentar el control de volumen muy gradualmente para evitar un aumento repentino del sonido.

#### 6. INSTRUCCIONES DE USO

1. Comprobar que la batería está en su sitio.
2. Pon el volumen en el nivel 1.
3. Colóquese el amplificador de sonido en la oreja, asegurándose de que el auricular esté justo dentro del oído antes de encenderlo.
4. Encienda el interruptor situado en el extremo del amplificador hasta que oiga un ruido de flujo de aire.
5. Aumente gradualmente el volumen hasta alcanzar un nivel adecuado.

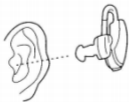


a. Forma correcta en cuanto a su colocación.

b. El amplificador debe introducirse en el oído con cuidado para evitar posibles daños.

## 7. PARTES DEL AMPLIFICADOR DE SONIDO



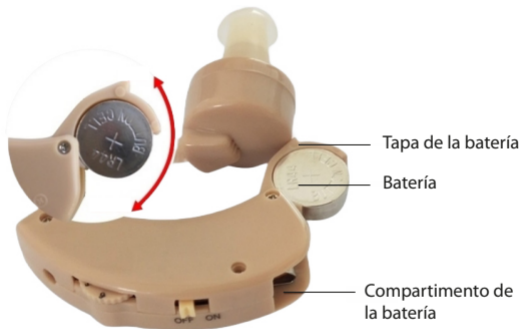

## 8. POSIBLES SOLUCIONES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El amplificador de sonido no funciona	Altavoz/auricular bloqueado	Limpie la abertura del altavoz/el auricular
	Amplificador de sonido apagado	Encender el amplificador de sonido
	El compartimento de las pilas no está cerrado correctamente	Cierre completamente el compartimento de las pilas
	Batería agotada	Sustituir la batería
	La batería está en el lugar equivocado	Asegúrese de que la batería está correctamente insertada
	Retraso de arranque	Espere unos segundos y vuelva a comprobar

Amplificador de sonido demasiado alto	Volumen demasiado alto	Disminuir el volumen
El amplificador de sonido no tiene el volumen suficiente o está distorsionado	Volumen demasiado bajo	Aumentar el volumen
	Batería baja	Sustituir la batería
	Altavoz/auricular bloqueado	Limpie la abertura del altavoz/el auricular
	Su salud auditiva ha cambiado	Póngase en contacto con su audioprotesista
El amplificador de sonido no emite ningún sonido	La cúpula está bloqueada con cera	Limpiar/sustituir la cúpula
	Batería insertada incorrectamente	Inserte la pila correctamente con el lado (+) hacia arriba
El amplificador suena bajo / no suena claro	Batería baja	Sustituye la batería por una nueva



El amplificador de sonido suena bajo / no suena claro	La cúpula está bloqueada con cera	Limpiar/sustituir cúpula
	El control de volumen no está lo suficientemente alto	Aumente el volumen de su amplificador de sonido hasta un nivel cómodo
Silbando	El amplificador de sonido no se inserta correctamente en el oído / Cerumen en el canal auditivo	Colocar correctamente el amplificador de sonido
	Cúpula mal introducida en el conducto auditivo	Quítese el amplificador de sonido y vuelva a introducir la cápsula en el conducto auditivo
	Cúpula demasiado pequeña para su canal auditivo	Seleccione un tamaño de cúpula mayor para garantizar que su cúpula selle completamente
	Pelo o ropa que cubra el micrófono	Aleje el pelo o la ropa del micrófono del amplificador

Silbando	El sonido es demasiado alto	Bajar el volumen
	La cúpula está bloqueada con cera	Limpiar o cambiar el auricular
El amplificador de sonido se sigue cayendo	Cúpula demasiado pequeña para el canal auditivo	Sustituye tu cúpula por una de mayor tamaño


## 1. WARNINGS

- 1. WARNING!** This sound amplifier is recommended for persons aged 18 years and over.
- 2. WARNING!** The sound amplifier should not cause pain at the time of insertion.
- 3. WARNING!** If you experience itching, redness, pain, swelling, inflammation or a burning sensation in or around the ears, stop using the product.
- 4. WARNING!** The earplug of the ear amplifier should not be uncomfortable or painful.
- 5. WARNING!** Remove the sound amplifier for MRI or other electromagnetic procedures.
- 6. WARNING!** If any part of the sound amplifier, such as the earplug, gets stuck in your ear and you cannot easily remove it with your fingers, seek medical help as soon as possible. Do not try to use tweezers or cotton buds, as they may push the part into the ear.
- 7. WARNING!** Do not share your sound amplifier with others.
- 8. WARNING!** People who start using sound amplifier sometimes need a few weeks to get used to them.
- 9. WARNING!** The sound amplifier, its parts and batteries are not a toy. Keep them out of the reach of children.
- 10. WARNING!** You may notice an accelerated build-up of earwax when using the sound amplifier. This is normal.

**11. WARNING!** Caution with high volume because of its auditory impact such as hearing loss with prolonged exposure.

## 2. SWITCH ON/OFF

To turn on the sound amplifier, the switch must be located where "ON" is indicated. The switch should be placed in the "OFF" position when the unit is not in use. This will ensure a longer battery life.

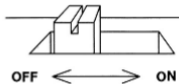

## 3. VOLUME

The sound amplifier has 6 levels of volume control. It is recommended to turn the device on at level 1 and from there adjust the volume according to the user's needs.

- Level 1 has no sound.
- Level 2 maximum gain  $30\pm 5$
- Level 3 maximum gain  $33\pm 5$
- Level 4 maximum gain  $36\pm 5$
- Level 5 maximum gain  $38\pm 5$
- Level 6 maximum gain  $40\pm 5$

## 4. BATTERY

Open the battery cover and insert the battery. Use a 1.5 V button cell battery.


## 5. CAUTION

This product is not waterproof, so care must be taken by the user to prevent water from entering the sound amplifier.

It is important to increase the volume control very gradually to avoid a sudden increase in sound.

## 6. INSTRUCTIONS FOR USE


1. Check that the battery is in place.
2. Set the volume to level 1.
3. Place the sound amplifier in your ear, making sure that the earpiece is just inside your ear before turning it on.
4. Turn on the switch at the end of the amplifier until you hear an airflow noise.
5. Gradually increase the volume to an appropriate level.

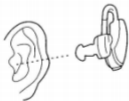


a. Correct form in terms of placement.

b. The amplifier must be carefully inserted into the ear to avoid possible damage.

## 7. PARTS OF THE SOUND AMPLIFIER

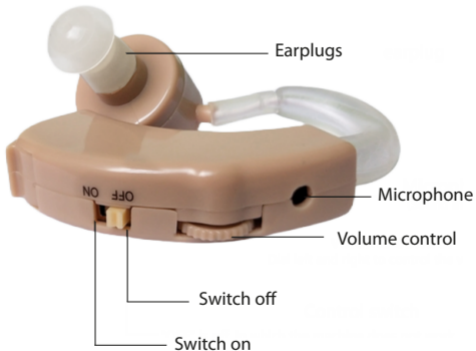

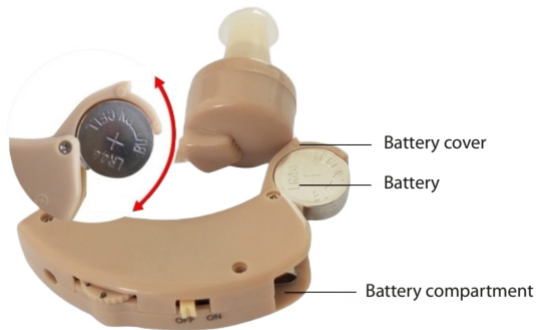

## 8. POSSIBLE SOLUTIONS

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Sound amplifier does not work	Speaker/headset blocked	Clean the speaker/ear-piece opening
	Sound amplifier off	Switching on the sound amplifier
	The battery compartment is not properly closed	Close the battery compartment completely
	Battery depleted	Replacing the battery
	The battery is in the wrong place	Make sure the battery is correctly inserted
	Start-up delay	Wait a few seconds and check again



Sound amplifier too loud	Volume too high	Decrease the volume
Sound amplifier is not loud enough or is distorted	Volume too low	Increasing the volume
	Low battery	Replacing the battery
	Speaker/headset blocked	Clean the speaker/ear-piece opening
	Your hearing health has changed	Contact your Hearing Care Professional
No sound from the sound amplifier	The dome is blocked with wax	Clean/replace the dome
	Battery inserted incorrectly	Insert the battery correctly with the (+) side up
Sound amplifier sounds low / doesn't sound clear	Low battery	Replace the battery with a new one

Sound amplifier sounds low / doesn't sound clear	The dome is blocked with wax.	Clean/replace dome
	Volume control is not loud enough	Increase the volume of your sound amplifier to a comfortable level
Whistling	Sound amplifier not inserted correctly in the ear / Cerumen in the ear canal	Correctly fitting the sound amplifier
	Dome not properly inserted in the ear canal	Remove the sound amplifier and reinsert the dome into the ear canal
	Dome too small for your ear canal	Select a larger dome size to ensure that your dome seals completely
	Hair or clothing covering the microphone	Move hair or clothing away from the sound amplifier microphone

Whistling	Sound is too loud	Turn down the volume
	The dome is blocked with wax	Clean or replace the earpiece
Sound amplifier keeps falling out	Dome too small for the ear canal	Replace your dome with a larger dome

CE Made in P.R.C



GUANGDONG ENNO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.  
No. 8 Huaan Road, Zhongkai High-tech District, Huizhou City,  
Guangdong, China 516006  
[service@ennome.net](mailto:service@ennome.net)



GRUPO R. QUERALTÓ S.A.  
Polígono Industrial El Pino, Calle Pino Albar, 24, 41016,  
Sevilla (Spain)  
[prrc@queralto.com](mailto:prrc@queralto.com)